


# APOLIUM®

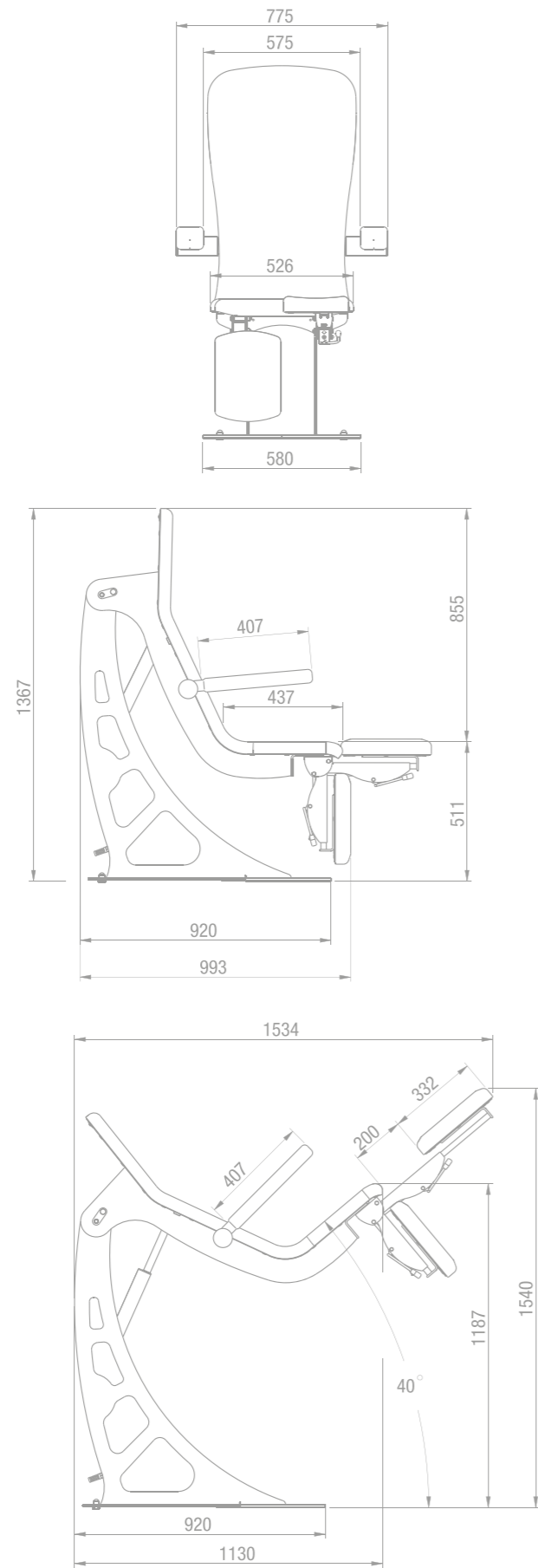

## VERKRIJGBARE KLEUREN

- |                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| 85 - SPRUCE        |  | NEW     |
| 08 - PERSIMMON     |  |         |
| 86 - COLONIAL BLUE |  |         |
| 87 - GLACIER       |  |         |
| 88 - EXPRESSO      |  |         |
|                    |  |         |
| 32 - BLUE          |  | CLASSIC |
| 93 - COTTAGE       |  |         |
| 35 - RED           |  |         |
| 34 - YELLOW        |  |         |
| 91 - WHITE         |  |         |
| 92 - MARINE        |  |         |
| 56 - DARKNESS      |  |         |
| 57 - ANTISTATIC    |  |         |
|                    |  |         |
| 64 - GRAPE         |  | VITAMIN |
| 66 - SWEET         |  |         |
| 63 - CEDRAT        |  |         |
| 67 - LAGOON        |  |         |
|                    |  |         |
| 80 - SKY           |  | COSY    |
| 81 - SEA GREEN     |  |         |
| 65 - LILAC         |  |         |
| 96 - TIN           |  |         |
| 82 - MOUSE GREY    |  |         |
| 83 - NATURAL       |  |         |
| 84 - CHOCOLATE     |  |         |

# APOLIUM®



22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE  
 Telefoon: + 33 (0)2 43 05 17 76 - Fax: + 33 (0)2 43 05 72 00  
[www.promotal.com](http://www.promotal.com)

Graphisme : atelier JBEOX



# APOLIUM®

**UW NIEUWE  
STANDAARD VOOR  
PODOLOGISCHE  
BEHANDELSTOELN**

Apolium is de eerste behandelstoel van Frans fabricaat **ontworpen voor en door** specialisten in podologie. Apolium is het resultaat van grootschalig onderzoek onder pedicures en podologen en werd speciaal ontworpen **voor gebruik** in uw praktijk.

Naar aanleiding van de ergonomische studie voor deze stoel kon de ideale vorm worden ontworpen voor een **natuurlijk comfortabele positie** van de patiënt en voor het aangenaam en eenvoudig uitvoeren van uw vak. Het innoverende ontwerp **zorgt voor een betere toegankelijkheid** van de stoel die een minimale hoogte van 51cm heeft en die de ontspanning van uw klanten stimuleert tijdens de behandeling.

Voor nog meer veiligheid en hygiëne stijgt dit bijzondere ontwerp van Apolium uit **boven de** huidige normen en in navolging van de medische regelgeving: totaal geen knelgevaar, veiligheidssensor, geen kantelgevaar...

## ONTWERP

- Speciaal ontworpen vorm voor een ideale natuurlijk comfortabele positie voor het menselijk lichaam, waarin **de druk op de raakvlakken zoveel mogelijk** wordt beperkt;
- Design met strakke lijnen dat eenvoudig wordt opgenomen in uw behandelomgeving;
- Seamless zadelwerk, zonder naden en eenvoudig schoon te maken;
- **Beter toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit**, via de voorkant of de zijkant;
- Zeer stabiel, ongeacht de positie van de patiënt.

## COMFORT

- Bodyshape zadelwerk<sup>1</sup> in twee lagen met **vormgeheugen**, wat de ontspanning van uw patiënt stimuleert;
- **Intuïtief draadloos pedaal** om de stoel zacht en vloeiend te bewegen;
- **Persoonlijk instelbare programmering** van uw twee favoriete posities, uit te voeren in één klik;
- **Noodaccu** (optioneel) en bakje als accessoire;
- Optimaal **onderhoudsgemak** door de goede bereikbaarheid van alle zichtbare delen, antibacterieel zadelwerk van brandklasse M1 en aangepaste beschermingsaccessoires.

## GEBRUIKSERGONOMIE

- Lage stand tot 51 cm, **hoge stand tot 154 cm**;
- **Losse functionele kniesteunen** met verstelbare diepte (+ 20cm) en met gespreide positie;
- De eerste volledig veilige podologiestoel **zonder knelgevaar en met veiligheidssensor**;
- **Ergonomische bedieningsorganen**: hefcontrole door middel van het intuïtief draadloos pedaal en eenvoudig te verstellen kniesteunen.

<sup>1</sup>Bodyshape: Tijdens het heffen wordt de positie van de patiënt niet veranderd



### • OPTIE • ACCESSOIRE



Lendensteunsysteem met opblaaspeer die door de patiënt wordt bediend  
Ref. 2880-01



Accu  
Ref. 2892-01



Wegwerp beenbeschermers verkocht per 100 stuks  
Ref. 2804-01



Afvalzakhouder  
Ref. 2874-01  
10 rollen van 20 vuilniszakken  
Ref. 962



Crystal bescherming  
Ref. 2806-01



Verstelbare hoofdsteun  
Ref. 2802-01



Papierrolhouder  
max. breedte 50 cm,  
diam. 20 cm - Ref. 167-10



Vastklembaar RVS bakje  
Ref. 2864-10



Vastklembaar vierkant RVS bakje  
Ref. 2864-01

Eenvoudig te onderhouden  
kleur: Grijs met gebroken wit als contrastkleur.

- Netto gewicht: 99 kg
- Bruto gewicht: 120 kg

| APOLIUM®     | Kniesteunen          | Opgenomen werkhogte |
|--------------|----------------------|---------------------|
| Ref. 2800-10 | Mechanisch gedeelte  | 110 cm              |
| Ref. 2800-20 | Gasveer              | 110 cm              |
| Ref. 2800-30 | Elektrische cilinder | Aanpasbare          |

Geleidelijke hefsnelheid, bevordert de gemoedsrust van de patiënt tijdens het positioneren.

Armsteun met zadelwerk

Handgrepen onder de kniesteunen, voor beter afstellen van de lengte.

Hoogte:  
• min.: 51 cm  
• max.: 154 cm

Geschikt voor patiënten tot 200 kg

- Zitting: Bodyshape met 2-lagen geheugenschuimmatras
- Antibacteriële zitting van M1 brandklasse (onbrandbaar)